

**Tallímetro portátil  
independiente**

# **ESTADÍMETRO**

- Medición de estatura exacta, portátil, confiable
- Rango de estatura 4.5 pulg a 81 pulg / 11.5 cm a 205 cm
- Funciona conjuntamente con la báscula DR400C de DETECTO
- Medición para niños y adultos
- El tallímetro se desarma con facilidad en 4 partes y se guarda convenientemente con la unidad de cabeza y la base

*Estuche opcional disponible  
para transporte: PHR-CASE  
(contiene el estadímetro PHR  
y la báscula de piso DR400C*



# TALLÍMETRO MECÁNICO

## Portátil e independiente

- Mide hasta 6'9" / 205 cm
- Dos estabilizadores para máxima exactitud cuando se mide contra una pared
- Construcción resistente y liviana, totalmente plástica
- Mide en pulgadas y en centímetros
- Cómodo y fácil de transportar

El tallímetro portátil PHR exclusivo de DETECTO es sencillo y fácil de configurar. No es necesario ajustarlo a la pared y puede ser ubicado contra una pared o colocado en forma independiente. Cuenta con dos espaciadores que proporcionan estabilidad adicional cuando es ubicado contra una pared. La placa grande de piso garantiza estabilidad total y permite que el tallímetro sea usado en cualquier lugar.

### Ideal para:

- Salud escolar
- Pediatras
- Médicos generalistas
- Clínicas móviles
- Enfermeras a domicilio
- Hospitales

El PHR puede ser usado conjuntamente con la báscula digital DR400C de DETECTO con una plataforma de bajo perfil de 12 x 12 pulgadas (30.48 x 30.48 cm), capacidad de 400 lb x 0.5 lb (181.44 x 0.23 kg) y lecturas en LCD de una pulgada. La báscula DR400C se alimenta con 6 baterías tipo AA, por lo tanto, usada conjuntamente con el tallímetro PHR proporciona una estación portátil de medición de pacientes.




Las mediciones de estatura pueden leerse a ambos lados del tallímetro PHR.



# Medición móvil y cómoda POR UN PRECIO ECONÓMICO



Posición de la unidad de cabeza sin DR400C

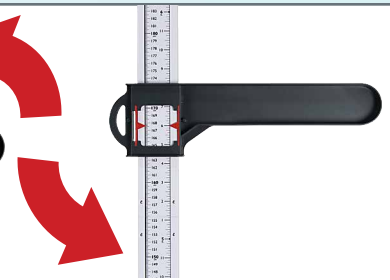

## Unidad de cabeza reversible para adaptarse a la báscula DR400C

El estadímetro modelo PHR de DETECTO cuenta con una exclusiva unidad de cabeza rebatible que le permite agregar una báscula digital de piso DETECTO DR400C en la base para medir simultáneamente el peso y la estatura. Si usa el PHR sin una báscula DR400C en la base, sencillamente de vuelta la unidad de cabeza hacia arriba para convertirlo y obtener solamente lecturas exactas de estatura. La unidad de cabeza tiene el tamaño exacto para compensar la estatura específica de la plataforma de la báscula cuando se usa con la báscula de perfil bajo DR400C.

*Bolso de mano opcional para transporte PHR-CASE de DETECTO con cierre y correa ajustable para hombro para transportarlo en forma cómoda. Fabricado con nailon balístico negro, el PHR-CASE cuenta con bolsillos adaptados exactamente para el PHR y DR400C de DETECTO.*

## Unidad de cabeza con deslizamiento suave

El muy fácil ajustar la unidad de cabeza con deslizamiento suave debido a la construcción plástica del tallímetro que no se deforma. Las mediciones son legibles a ambos lados del tallímetro con numeración en negritas, muy visibles y un señalador en color rojo brillante para una óptima medición del paciente.

## COMODIDAD PORTÁTIL



## Estuche Opcional

# PARA TRANSPORTE

El estuche para transporte es resistente al agua y al polvo y proporciona capacidades personalizadas de almacenamiento seguro y compacto para el transporte de estos dispositivos de medición. El PHR-CASE exclusivo es un accesorio indispensable cuando compra el PHR y la DR400C de DETECTO.

La varilla de medición puede ser desarmada con unos pocos y rápidos pasos y transportada con comodidad a cualquier lugar en el estuche opcional para transporte con correa para hombro (modelo PHR-CASE). El diseño inteligente del estuche para transporte incluye bolsillos internos que aseguran la columna de varilla de estatura en un lado y la báscula digital DR400C y el resto del estadímetro en el otro lado.




# MEDICIÓN

## Clínica móvil



La varilla plegable de medición de estatura del estadímetro se separa en cuatro partes, de modo que en solo unos pocos pasos puede ser adosada a la plataforma estable. Cuando está desarmado, el estadímetro es fácil de transportar.

Las piezas encajan juntas de forma perfecta para transportarlas fácilmente. Todo se adapta convenientemente en la PHR-CASE opcional de DETECTO para uso móvil. Todas estas características hacen que este estadímetro sea la herramienta ideal para aquellas personas que necesitan usar un dispositivo confiable de medición en diferentes sitios.

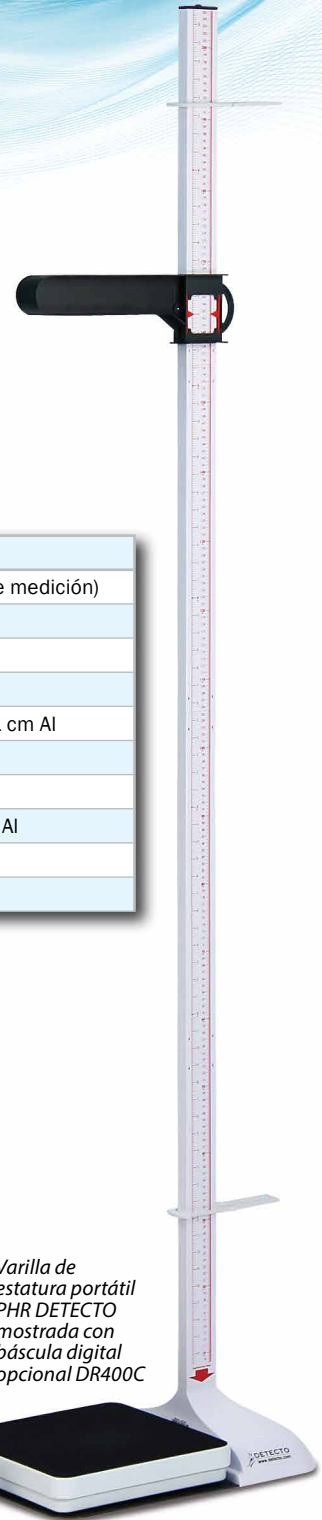

Varilla de estatura portátil PHR DETECTO mostrada con báscula digital opcional DR400C

<b>Modelo</b>	PHR
<b>Rango de estatura</b>	4.5 pulg a 81 pulg / 11.5 cm a 205 cm (visible a ambos lados de la varilla de medición)
<b>Graduación</b>	0.125 pulg / 0.1 cm
<b>Construcción</b>	Plástico
<b>Cantidad de piezas</b>	8 en total
<b>Dimensiones del producto</b>	13.0 pulg An x 19.8 pulg Pr x 83.5 pulg Al / 33.0 cm An x 50.3 cm Pr x 212.1 cm Al
<b>Peso del producto</b>	8.5 lb / 3.8 kg
<b>Dimensiones de almacenamiento</b>	15 pulg An x 23.5 pulg Pr x 3.8 pulg Al / 38.1 cm An x 59.7 cm Pr x 9.7 cm Al
<b>Dimensiones para el envío</b>	14 pulg An x 23.5 pulg Pr x 6.25 pulg Al / 35.5 cm An x 59.7 cm Pr x 15.9 cm Al
<b>Peso para el envío</b>	12 lb / 5 kg
<b>Código UPC</b>	809161199208



Estuche opcional PHR-CASE

<b>Modelo</b>	PHR-CASE
<b>Construcción</b>	Nailon balístico negro con correa de transporte para hombro
<b>Capacidad de almacenamiento</b>	Puede contener la varilla de estatura PHR y la báscula DR400C (bolsillos incluidos para ambos)
<b>Dimensiones del producto</b>	25.0 pulg An x 6.3 pulg Pr x 16.0 pulg Al / 64.3 cm An x 16.0 cm Pr x 40.6 cm Al
<b>Peso del producto</b>	4.0 lb / 1.8 kg
<b>Dimensiones para el envío</b>	17 pulg An x 13 pulg Pr x 10 pulg Al / 43.1 cm An x 33 cm Pr x 25.4 cm Al
<b>Peso para el envío</b>	8 lb / 3.6 kg
<b>Código UPC</b>	809161199307



**DETECTO**  
www.Detecto.com

203 E. Daugberty, Webb City, MO 64870 EE. UU.  
Teléfono: 417-673-4631 o 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

**Móvil:** m.detecto.com

DETECTO se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

**VENDIDO POR:**