



apex[®]
BALANCES CLINIQUES

BALANCES CLINIQUES NUMÉRIQUES A HAUTEUR DES YEUX

- 600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg de capacité
- Toise sonique sans contact ou télescopique
- Plateau très spacieux et plat (L 17 po x P 17 po x H 2.75 po)



Modèle APEX-SH

Modèle APEX



**LECTURE INSTANTANÉE
DU POIDS ET DE LA
TAILLE SANS APPUYER
SUR UN SEUL BOUTON**

Les toises soniques sans contact disponibles sur certains modèles apex[®] fournissent des lectures numériques immédiates pour une vitesse, une précision et une hygiène optimales

DE
apex

L'EFFICACITÉ DE LA
MENSURATION
DU PATIENT
+ ET DE LA CONCEPTION
STYLEE
EST MAINTENANT DISPONIBLE!

TOISE SONIQUE D'AVANT-GARDE

La toise sonique unique sans contact de DETECTO capture instantanément la taille du patient et mesure les patients de presque n'importe quelle taille. La toise sonique de l'Apex mesure de 24 pouces (2 pieds) à 86 pouces (7'2") par incréments de 0.2 pouce et mesure en système métriques de 60 cm à 218 cm par incréments de 0.5 cm (Modèle APEX-SH). Il suffit de marcher sur la balance pour que votre hauteur soit capturée et affichée sur l'écran LCD en une seconde.



*Les balances apex® de
DETECTO mesurent
efficacement le poids
et la taille des patients
de tous âges et de
toutes tailles.*



Les modèles de toise télescopique d'apex mesurent de 24 pouces (2 pieds) à 86 pouces (7'2") par incréments de 0.125 pouce, et mesurent en système métrique de 60 cm à 218 cm par incréments de 0.1 cm (Modèle APEX). Pour calculer l'IMC, utilisez simplement les flèches de défilement pour entrer la mesure de la hauteur, puis appuyez sur la touche IMC.

- Affichage du poids à hauteur des yeux
- Construction de colonne robuste
- 10 modèles standard différents apex® à votre disposition






INDICATEUR DE POIDS HAUTE TECHNOLOGIE

L'apex® est doté d'un indicateur de haute technologie ressemblant à un téléphone intelligent pour une utilisation facile avec 6 boutons simples et un écran LCD audacieux pour un affichage large.

- Affichage de poids LCD bleu clinique de 0.75 pouce de hauteur
- Calcul de l'indice de masse corporelle
- Poids et taille affichés simultanément à l'écran
- Capture automatiquement le poids temporairement pendant quelques secondes de sorte que vous puissiez visualiser et enregistrer facilement les mesures
- Indication du niveau de charge de la batterie

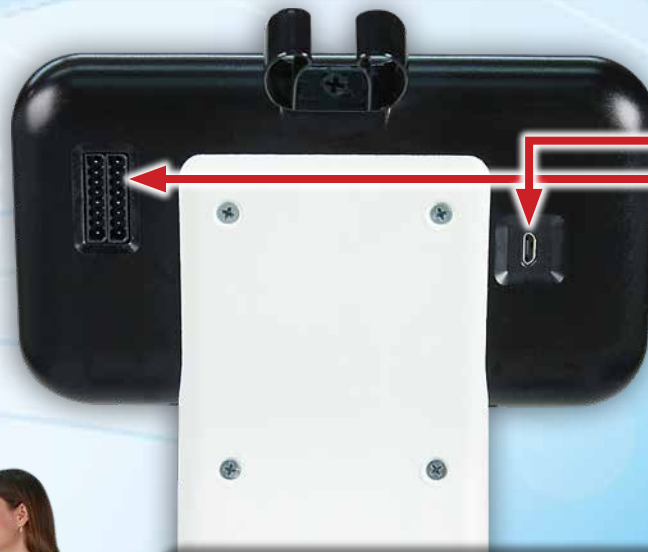

CONNECTIVITÉ POLYVALENTE:

- 1 micro port USB-B
- 2 ports série RS232
- HL7 conforme à l'IEEE 11073 (standard)
- Modèles Ethernet Wi-Fi disponibles pour DME/DSE sans fil
- Connectivité des appareils Welch Allyn® disponible: CVSM, CSM et LXI (voir le tableau des modèles au verso)

Les deux roulettes intégrées permettent le déplacement aisé de tous les modèles apex®.



ALIMENTATION



Les modèles apex® sont disponibles avec un adaptateur secteur inclus en standard (voir le tableau des modèles au verso).

Un niveau à bulle intégré permet de localiser la surface la plus plate possible sur votre sol.



Le couvercle soulevable du plateau de l'apex® peut être retiré pour le nettoyage ou pour remplacer les 12 piles AA.

L'intégrité de la base structurale de la balance est fabriquée de manière très robuste pour une sécurité et une stabilité optimales du patient.



BALANCES NUMÉRIQUES APEX® À HAUTEUR DES YEUX AVEC TOISE TÉLÉSCOPIQUE					
Modèle	APEX	APEX-AC	APEX-WI-AC	APEX-UWA-AC	APEX-LXI-AC
Capacité	600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg				
Toise	Toise télescopique				
Dimensions de la Toise	24" (2') - 86" (7'2") x 0.125 po / 60 cm - 218 cm x 0.1 cm				
DIMENSIONS	Dimensions Globales	L 17 po x D 19.5 po x H 53.3 po / L 43 cm x P 49.5 cm x H 135.3 cm			
	Taille du Plateau	L 17 po x P 17 po x H 2,75 po / L 43.2 cm x P 43.2 cm x H 7 cm			
	LCD	Hauteur chiffres LCD 0.75 po / 1.9 cm			
ALIMENTATION	Piles	12 piles AA (non incluses)			
	Adaptateur CA (inclus)	•	•	•	•
	Ports	2 ports série RS232 et 1 port micro USB-B			
Connectivité			Wi-Fi Ethernet	Welch Allyn CVSM/CSM	Welch Allyn LXI
Poids net	31 lb / 14 kg				
Poids d'Expédition	40 lb / 18 kg				
Dimensions d'Expédition	58 in x 20 in x 6 in / 147 cm x 51 cm x 15 cm				
Code UPC	809161197808	809161197907	809161198003	809161198102	809161198201

BALANCES NUMÉRIQUES APEX® À HAUTEUR DES YEUX AVEC TOISE SONIQUE					
Modèle	APEX-SH	APEX-SH-AC	APEX-SH-WI-AC	APEX-SH-UWA-AC	APEX-SH-LXI-AC
Capacité	600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg				
Toise	Toise sonique sans contact				
Dimensions de la toise	24" (2') - 86" (7'2") x 0.2 po / 60 cm - 218 cm x 0.5 cm				
DIMENSIONS	Dimensions globales	L 17 po x D 19.5 po x H 89.5 po / L 43 cm x P 49.5 cm x H 227.3 cm			
	Taille du plateau	L 17 po x P 17 po x H 2,75 po / L 43.2 cm x P 43.2 cm x H 7 cm			
	LCD	Hauteur chiffres LCD 0.75 po / 1.9 cm			
ALIMENTATION	Piles	12 piles AA (non incluses)			
	Adaptateur CA (inclus)	•	•	•	•
	Ports	2 ports série RS232 et 1 port micro USB-B			
Connectivité			Wi-Fi Ethernet	Welch Allyn CVSM/CSM	Welch Allyn LXI
Poids net	32 lb / 14 kg				
Poids d'expédition	41 lb / 19 kg				
Dimensions d'expédition	58 in x 20 in x 6 in / 147 cm x 51 cm x 15 cm				
Code UPC	809161197808	809161197907	809161198003	809161198102	809161198201



DETECTO se réserve le droit d'améliorer, de renforcer ou de modifier les caractéristiques et spécifications sans préavis.

DETECTO
www.Detecto.com

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

Mobile : m.detecto.com

VENDU PAR :